


ProPulse®

VersaTron®

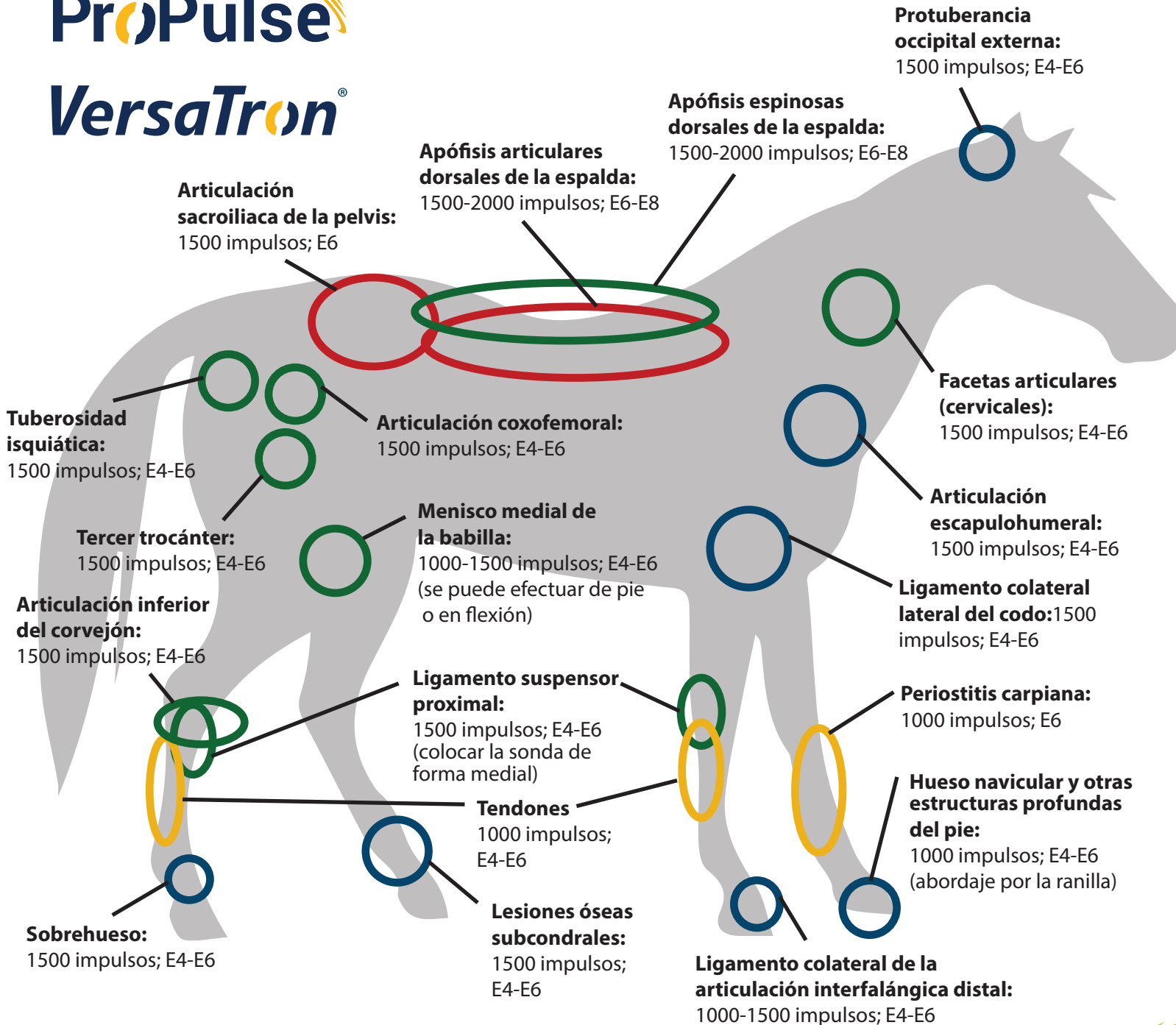

- Electrodo 5 mm
- Electrodo 20 mm
- Electrodo 35 mm
- Electrodo 80 mm

RECOMENDACIONES GENERALES

1-3 tratamientos;
intervalo: 2-3 semanas

- **Espalda**
- **Tendón/Ligamentos**
1-3 tratamientos;
intervalo: 4 semanas

OTROS:

- **Metacarpiano/metatarsiano**
5mm/20mm
1500 impulsos
E6
- **Heridas superficiales**
5mm
8 impulsos/cm²; min 500
E1-E2

Protocolos por cortesía de Virginia Equine Imaging

©2017 Pulse Veterinary Technologies, LLC • www.PulseVet.com • 1-800-245-4417 • +1-678-987-5100

PulseVet®